


2022-01-07 深圳元初总仓氟苯尼考快速检测结果

样品名称	元童绿壳鸡蛋	生产日期	2022-01-06
检测项目	鸡蛋兽药氟苯尼考		
检测内容	判定标准	实际检测结果	
氟苯尼考	<p>7 结果判断</p> <p>阴性 (-): 在检测窗内, 对照线 (C) 出现紫红色线, 检测线 (T) 显色与对照线一致或更深, 表明样本中氟苯尼考浓度低于0.2ppb或无氟苯尼考。</p> <p>阳性 (+): 在检测窗内, 对照线 (C) 出现紫红色线, 检测线 (T) 不显色或比对照线浅, 表明样本中氟苯尼考浓度高于0.2ppb。</p> <p>无效: 在检测窗内, 对照线 (C) 不出现紫红色线。</p> 		
判定	阴性		
结论	2022-01-06 批次元童绿壳鸡蛋氟苯尼考检测结果为合格。		

检测人: 唐先锋

备注: 氟苯尼考检测限 0.2ppb (ng/ml)。

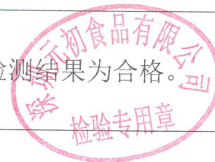

深圳元初总仓生鲜产品检测报告

检测日期：2022年1月7日

序号	样本名称	包装日期	吸光度	抑制率%	定性	供应商
1	水仙芒	2022-1-7	0.8353	4.95%	阴性	深圳元初自采
2	澳洲油桃	2022-1-7	0.8538	2.84%	阴性	深圳元初自采
3	云冠橙	2022-1-7	0.821	6.58%	阴性	佳沃
4	阿克苏冰糖心苹果(礼盒)	2022-1-7	0.5748	34.59%	阴性	爱疆农业
5	甘美西瓜	2022-1-7	0.9257	2.06%	阴性	阳光庄园
6	脆蜜金柑	2022-1-7	0.6152	30.00%	阴性	瑶丹红
7	丹东99草莓礼盒	2022-1-6	0.9375	2.10%	阴性	淘普
8	有机菜心	2022-1-7	0.8678	1.25%	阴性	绿乐源
9	惠东 蒜头	2022-1-7	0.856	2.59%	阴性	林谷鲜
10	供港 菠菜	2022-1-7	0.7652	12.93%	阴性	高超
11	供港 白菜心	2022-1-7	0.8766	0.25%	阴性	高超
12	供港 西芹	2022-1-7	0.51	41.97%	阴性	高超
13	供港 夏阳白	2022-1-7	0.7878	10.36%	阴性	全发
14	供港 清脆小青瓜	2022-1-7	0.8398	4.44%	阴性	全发
15	供港 西洋菜	2022-1-7	0.8709	0.90%	阴性	全发
16	罗浮山农场 有机生菜	2022-1-7	0.7136	18.80%	阴性	鑫茂农业
17	金针菇	2022-1-7	0.7555	14.03%	阴性	永佳
18	白玉菇	2022-1-7	0.6895	21.54%	阴性	永佳
19	凯克萨薄荷	2022-1-7	0.7574	13.81%	阴性	联合菌业
20	沃小番 水果番茄(脆甜)	2022-1-7	0.8791	1.99%	阴性	夏之秋果蔬
21	黑金刚莲雾	2022-1-7	0.7643	13.03%	阴性	源兴果品

检测项目：有机磷及氨基甲酸酯类农药

检测方式：酶抑制率法：（GB/T5009.199-2003）

抑制率是指酶的安全指数，抑制率大于50%的为农药残留超标。

